


タブレット及びハンドスキャナの使用法

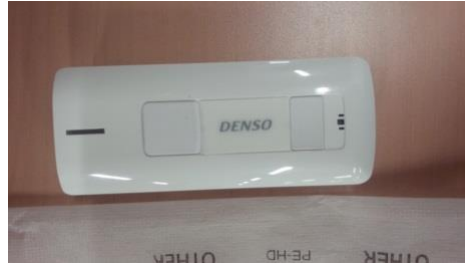

操作方法概略

起動～検査まで


① タブレットの電源を起動

タブレット右わきの灰色のボタンを長押しして電源を起動する。




② ハンドスキャナの電源を起動

ハンドスキャナ表面下部のボタン（2種類ある内の小さい方）を長押しする。

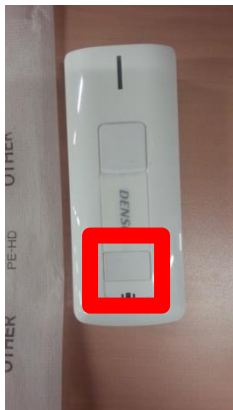

③ 健診プログラムの起動

デスクトップ上の「KenshinNKK」をダブルクリック（下の赤枠内のショートカットアイコンの方）して起動する。

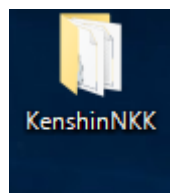

④ 健診機関及び機材パターンの選択

画面上部の健診機関選択で伊勢崎健診プラザを選択し、使用する機材パターン(黄枠内)を「1.伊勢崎健診プラザ」を選択する。(施設時。使用する機材によって違うため注意。))を選択する。

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a status bar with '圏外 OFF 87%' and a date '2018年 01月18日'. Below the date is 'Ver.171226'. The main content area is divided into two sections. The first section, '検診実施機関', has a dropdown menu with '4.日健協伊勢崎' selected. The second section, '検診機材パターン', has a list of options: '1.伊勢崎健診プラザ', '2.とちぎ健診プラザ', '3.巡回 1', '4.巡回 2', and '5.巡回 3'. To the right of these sections are fields for '検査実施者' (123) and a checked 'データ取得' button. At the bottom are 'メニュー' and '終了' buttons.

⑤ メニューボタンを押してメニュー画面に移る

画面右下のメニューを押してメニュー画面に移る。

The screenshot shows the 'メインメニュー' (Main Menu) screen. The top left shows the same selection options as in the previous screenshot. The top right shows the date '2018年 01月18日' and 'Ver.171226'. The main area contains a grid of buttons: '管理番号入力', '検査選択入力', '検査選択(前回)', '単 独 検 査', '蓄積データ送信', '受診者情報登録', '通信テスト/設定', '蓄積データ確認', '未受診項目照会', '設 定 状 況', 'データ初期化', '保健指導', '受診票回収', and 'QRシール印刷'. At the bottom, there is a 'メニュー' button (highlighted with a red box), a '終了' button, a 'スキャナ再接続' button, a '検査実施者' field with '123', and a '戻る' button.

⑥ パソコンとの通信状態を確認

下部画像の赤枠内の通信テスト/設定を押し、黄枠内通信テスト開始を押して通信状態の確認を行う。通信が OK ならばメニュー画面に戻る。

The screenshot shows the '通信テスト' (Communication Test) screen. The top left shows the 'メインメニュー' with '通信テスト/設定' highlighted in a red box. The main area has a '通信テストログ' section with '通信テストを開始します' and a '通信テスト開始' button (highlighted in a yellow box). Below this are '通信設定' (ON) and 'OFF' buttons, with 'ON' selected. The '通信先' is '192.168.6.12'. At the bottom are 'スキャナ再接続', '検査実施者' (123), and '戻る' buttons. On the right side, there are '切替' and '戻る' buttons.


⑦ プリンターの電源をつける

下部画像赤枠内の POWER ボタンを長押しして電源をオンにして青枠内の電池マーク及び STATUS ランプが点灯していることを確認する。




⑧ 印刷テストを行う

タブレット操作に戻り左下部画像赤枠内の設定状況を押し、右下部画像黄枠内のプリンターの部分を押し青枠内印刷を押す。印刷テストが完了したら黒枠内キャンセルを押してメニュー画面に戻る。

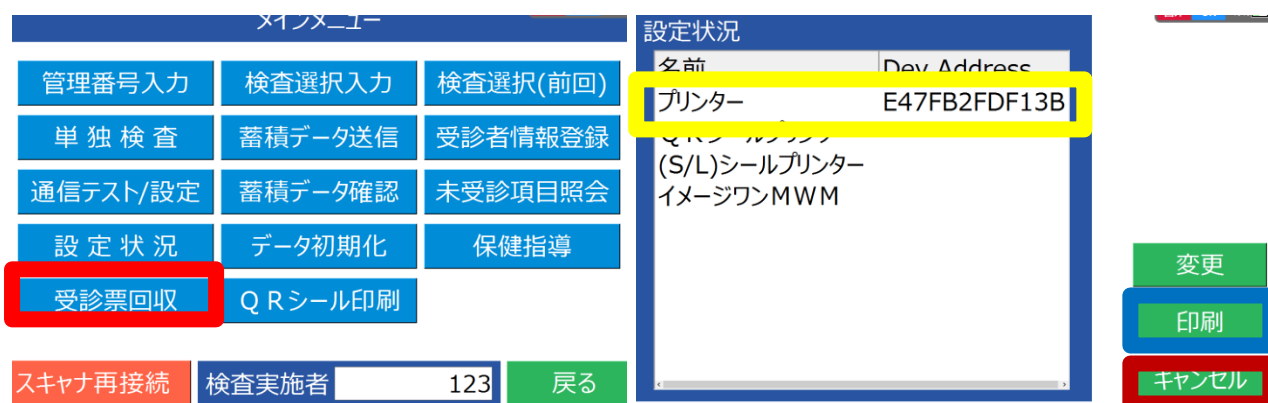

⑨ 検査を選択する

下部画像赤枠内の検査選択入力を押して担当検査（画像例では血圧）を選択する。

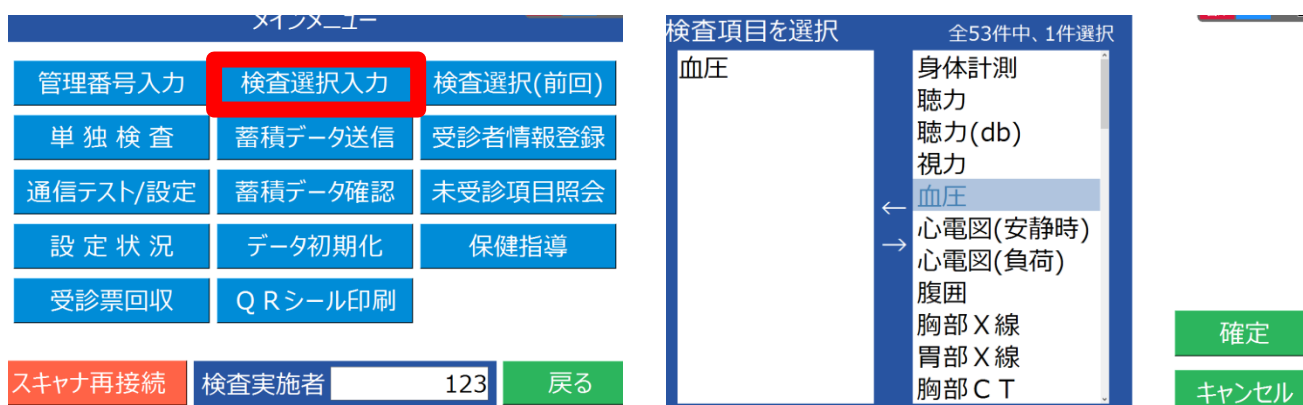

健診終了後

① 初期画面に戻る

メニュー画面に戻り、健診機関及び機材パターン選択画面に戻る

メインメニュー

管理番号入力	検査選択入力	検査選択(前回)
単 独 検 査	蓄積データ送信	受診者情報登録
通信テスト/設定	蓄積データ確認	未受診項目照会
設 定 状 況	データ初期化	保健指導
受診票回収	QRシール印刷	

検査実施機関
4.日健協伊勢崎

検査機材パターン
1.伊勢崎健診プラザ
2.とちぎ健診プラザ
3.巡回1
4.巡回2
5.巡回3

2018年
01月18日
Ver.171226

検査実施者
123

データ取得

メニュー

終了

スキャナ再接続 検査実施者 123 **戻る**

② デスクトップに戻る

画面右下終了を押してデスクトップ画面に戻る

検査実施機関
4.日健協伊勢崎

2018年
01月18日
Ver.171226

検査機材パターン
1.伊勢崎健診プラザ
2.とちぎ健診プラザ
3.巡回1
4.巡回2
5.巡回3

検査実施者
123


データ取得

メニュー

終了


③ タブレットの電源をオフにする

タブレット右わきの灰色のボタンを長押しし、画面の指示通り下にスワイプしてシャットダウンする。

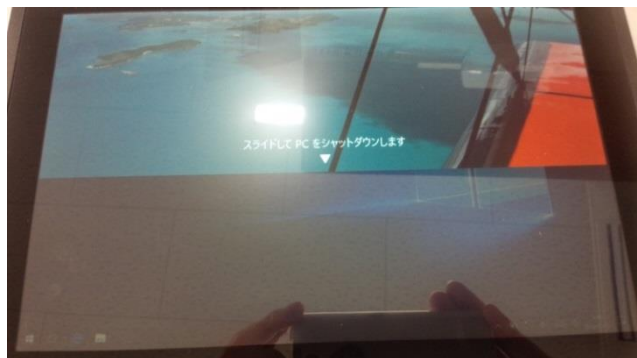

④ ハンドスキャナの電源をオフにする


読み取りボタン+電源ボタンを音が鳴るまで同時押しする。

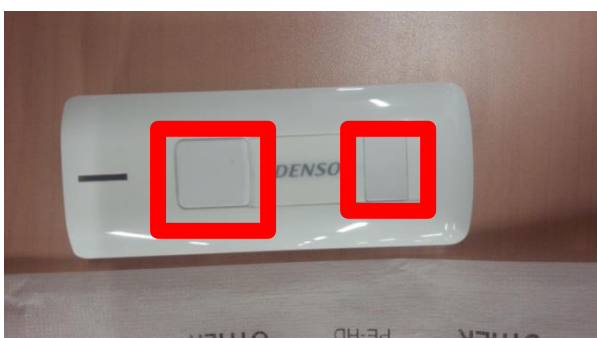

トラブルシューティングフローチャート


① タブレットの電源がつかない

・電源に繋がっているか確認

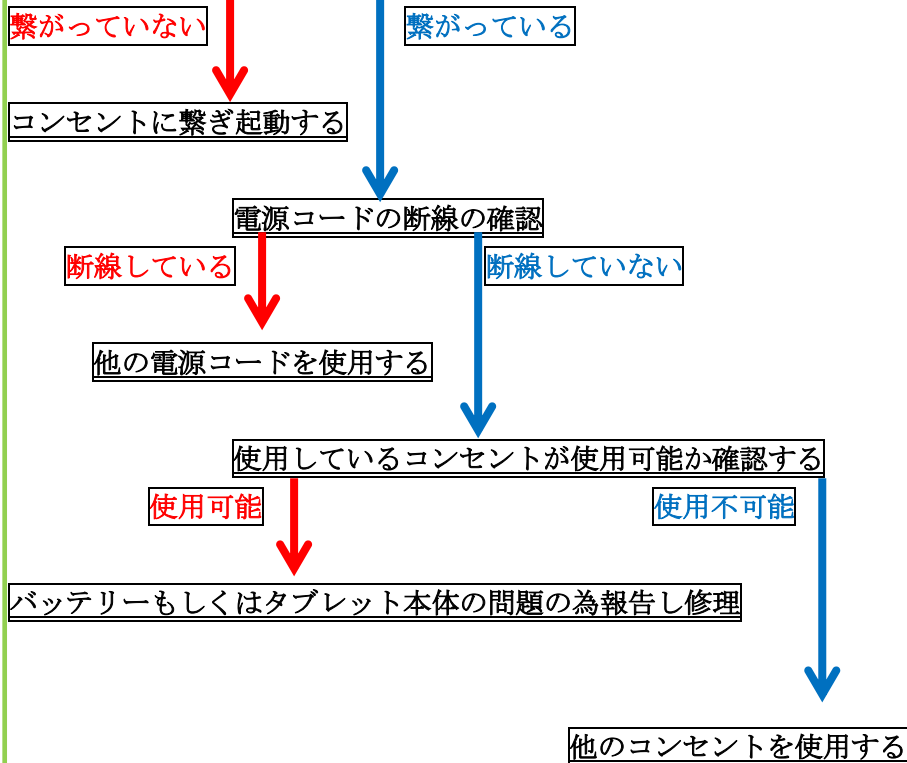

② ハンドスキャナの電源がつかない

裏側の蓋を開けて電池が入っているか確認

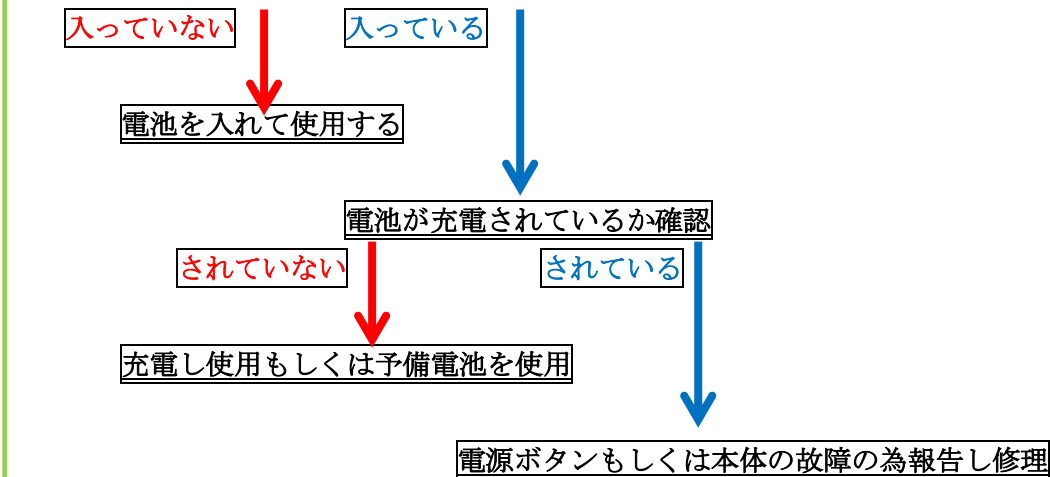

③ ハンドスキャナが読み取らない

メニュー画面に戻り画面左下の再接続を行う

青く点灯した

青く点灯しない

再接続されたためそのまま使用

タブレットとハンドスキャナに振られた番号の確認

一致していない

一致している

それぞれ番号を揃えて使用する

機器設定が変更されているか故障の為報告

施設健診と巡回健診の違いについて

施設健診

- ・受付にてチェックシートが発行される
- ・受診票+チェックシート+その他書類で回ってくる
- ・タブレットにて結果を登録したらチェックシートに押印する
- ・採血管は採血支援システムを使用
- ・タブレットと連動し受診票を読み取ると採血管にシールが貼られて出てくる（基本3種+Loxまで?）
- ・生化項目が4項目以上になるとシールが発行されてスピッツと一緒に必要本数分出てくる
(見落とし注意)
- ・そのため、従来通りに本数の計算を行って採血本数を把握すること
- ・生化の採血管は9mlを使用する

巡回健診

- ・チェックシートの発行無し
- ・受診票+その他書類で回ってくる
- ・生化の採血管は6mlを使用する

